

STR4 ローター


Rotators

STR4 回転駆動部ユニット

- ▶ 回転作動で様々な容器を攪拌
- ▶ 5種類の回転ドラムと組み合わせて多目的に使用可
- ▶ 作動 :アナログタイマー設定 10 ~ 60 分又は連続
- ▶ 回転速度可変 : 6 ~ 60 rpm

仕様

寸法・重量	650 (幅) x 250 (奥) x 250 (高) mm, 6.4 kg
電源	100 V, 50/60 Hz, 50 W

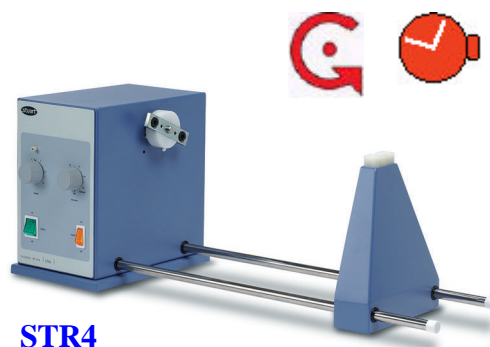

STR4


STR4 用回転ドラム

用途に応じた回転ドラムをお選び頂き、回転駆動部ユニットと合わせてご注文下さい。

STR4/1 回転ドラム、試験管用

試験管の上下振とう用
試験管を固定するクリップ付プレート(別売)を金属ドラム
4面に取付け可能


クリップ付プレート
装着時 STR4/1 と STR4

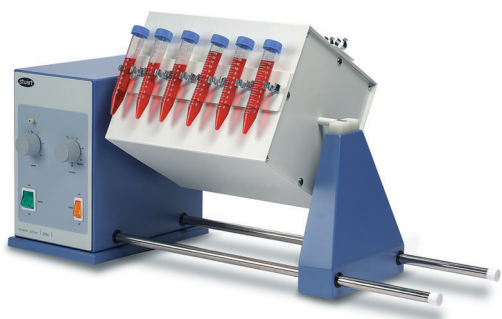

STR4/2 回転ドラム、フラスコ又はボトル2本用


250 mL 円錐型フラスコ又は試薬ボトル2本取付け可能、
上下振とう用。
容器の上下はボトルのネックを押さえるカラーとワッシャー
で確実に固定

STR4/2 と STR4

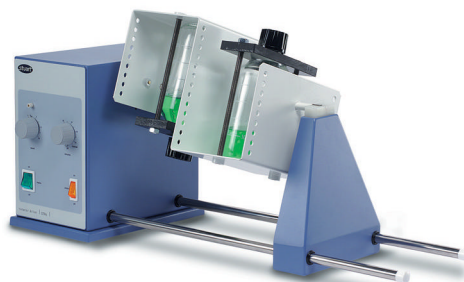


STR4/3 回転ドラム、ボトル1本用、8の字回転


Velcro®ファスナーストラップで固定された容器は斜め45°の位置で8の字回転
 粉末入りの広口ビンや塗料缶等、長さ200mm、外径120mmのボトルまで使用可

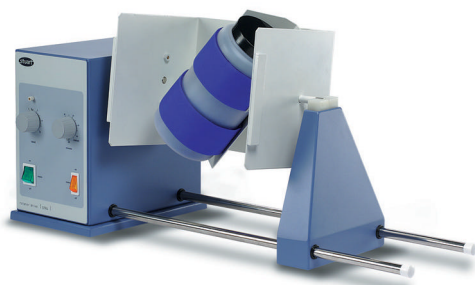STR4/3 と STR4**STR4/4 回転ドラム、ボトル4本用**

Perspex製の仕切りにボトル4本取付け可
 長さ300mm、外径120mmのボトルまで使用可

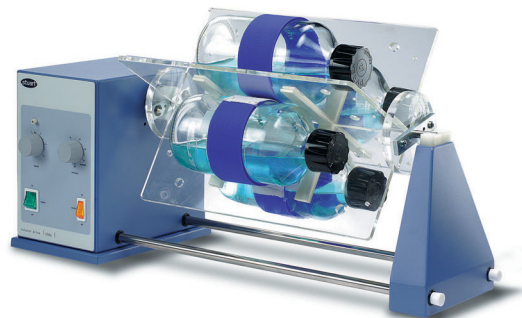STR4/4 と STR4**STR4/5 回転ドラム、1.5 mL マイクロチューブ用**

4つのラック(標準付属)にはそれぞれマイクロチューブ60本取付け可
 多検体処理に最適

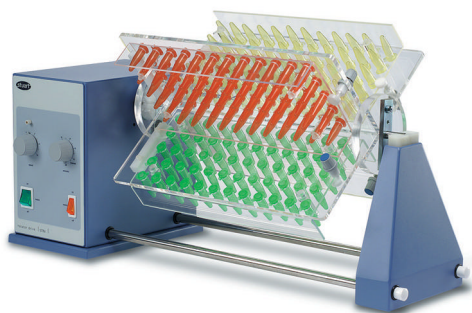STR4/5 ・ STR4**製品一覧**

製品番号	内容
STR4	ローテーター駆動ユニット (回転ドラムは別途ご注文下さい。)
STR4/1	回転ドラム 試験管用 (試験管を固定するクリッププレートは別途ご注文下さい。)
STR1/1	STR4/1用クリップ付プレート 12 x 12 mm 試験管用、2枚入り
STR1/2	STR4/1用クリップ付プレート 10 x 16 mm 試験管用、2枚入り
STR1/3	STR4/1用クリップ付プレート 8 x 9 mm 試験管用、2枚入り
STR1/4	STR4/1用クリップ付プレート 7 x 24 mm 試験管用、2枚入り
STR4/2	回転ドラム フラスコ又はボトル 2本用
STR4/3	回転ドラム ボトル1本用、8の字回転
STR4/4	回転ドラム ボトル4本用
STR4/5	回転ドラム、マイクロチューブ用
SW2/1	交換用ラック、1.5 mL マイクロチューブ60本用

仕様は予告なく変更になる場合があります。

(04.05)

三和通商株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-13-2

Tel: 03-3492-6300 Fax: 03-3492-6311

E-mail: mailto@sanwatsusho.com

www.sanwatsusho.com